



Campagne Vaccinali 2024-2025

Conferimento delle vaccinazioni al sistema regionale On.VAC AVUR di ONIT attraverso la cooperazione applicativa.

Registrazione e invio vaccinazioni con le cartelle cliniche di CompuGroup Medical Italia Srl



Campagne Vaccinali 2024-2025

Le vaccinazioni da conferire al sistema regionale On.VAC AVUR sono:

- **Anti-influenzale**
- **Anti-pneumococcica**
- **Anti-COVID**
- **Anti-Papillomavirus**
- **Anti-Herpes Zoster**

Verifica impostazioni Utenza Medico

All'interno del gestionale di cartella clinica, nelle **impostazioni dell'utenza medico**, sarà fondamentale verificare innanzitutto che siano presenti e corretti i dati relativi al:

- **Codice Fiscale;**
- **Numero Regionale.**

Registrazione vaccinazione in cartella clinica

Nella registrazione di una vaccinazione andranno **obbligatoriamente indicate** le seguenti informazioni:

- **Tipologia** (*tipologia di vaccinazione effettuata*)
- **Farmaco** (*nome vaccino somministrato*), **Nr. Lotto e Scadenza Lotto**
- **Via di somministrazione** (*es. INTRAMUSCOLO*)
- **Sito di inoculazione** (*es. DELTOIDE SX*)
- **Categoria di rischio**
- **Condizione sanitaria**
- **Modalità di pagamento** (*A CARICO SSN, IN CO-PAYMENT, A PAGAMENTO INTEGRALE*).


Registrazione vaccinazione in cartella clinica

Al fine di semplificare la registrazione di una vaccinazione per ciascun paziente, a partire dall'inserimento successivo al primo:

- **categoria di rischio e condizione sanitaria** saranno impostate con valori predefiniti sensibili all'età dell'assistito;
- **vaccinazione, vaccino, lotto, scadenza, sito di inoculazione, via di inoculazione e modalità di pagamento**, saranno preimpostati attingendo dalla registrazione precedente (*se presenti*). In caso contrario sarà necessario procedere (*necessariamente*) all'inserimento di suddette informazioni.

Invio delle vaccinazioni ad On.VAC AVUR

Alla conferma di una **nuova registrazione, modifica o cancellazione** di una vaccinazione (*cioè, delle sole vaccinazioni inserite secondo lo standard previsto dalla nuova campagna 2024-2025, a partire dal momento in cui siano stati effettuati gli aggiornamenti propedeutici del programma e delle relative banche dati*) sarà mostrato il messaggio

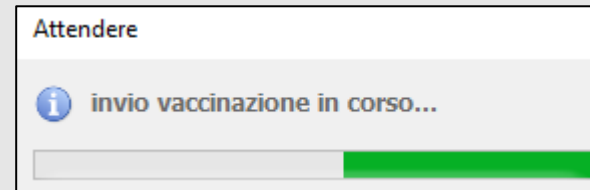

Le informazioni saranno **inviate direttamente ad On.VAC AVUR senza bisogno di ulteriori passaggi** nell'addon CGM STS.


A conferma dell'invio eseguito con successo verrà visualizzato un balloon in basso a destra



Tutte le **funzionalità** introdotte da CGM STS si intendono attive **solo per l'utenza medico**.

Nell'addon CGM STS si attiverà la sezione «**Vaccinazioni**»

Invio cumulativo
vaccinazioni
ad On.VAC AVUR

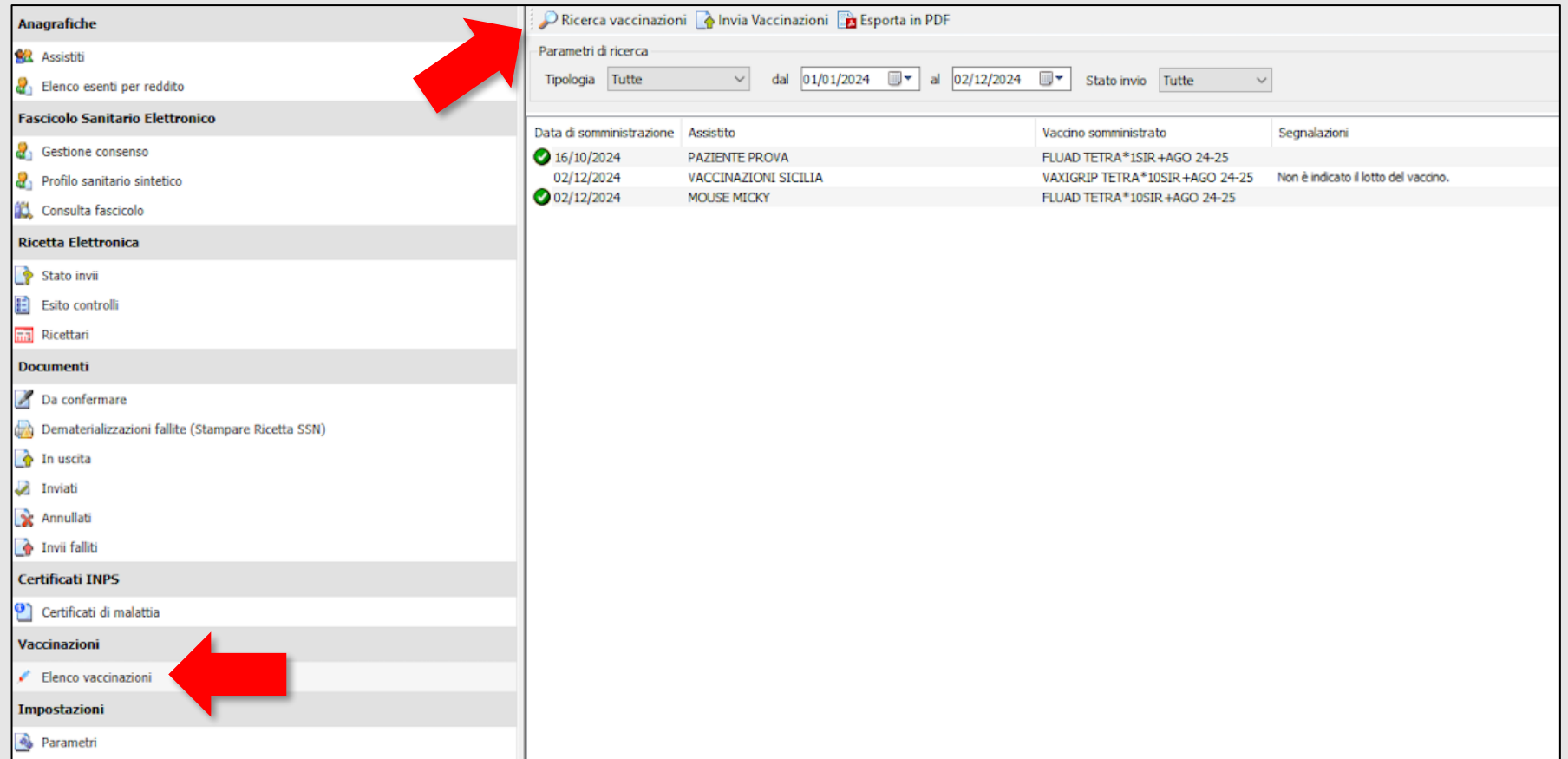


The screenshot shows the CGM STS interface. On the left is a sidebar menu with categories: Anagrafiche, Fascicolo Sanitario Elettronico, Ricetta Elettronica, Documenti, Certificati INPS, Vaccinazioni, and Impostazioni. The 'Vaccinazioni' category is highlighted, and the 'Elenco vaccinazioni' option is selected, indicated by a red arrow. The main area displays the 'Ricerca vaccinazioni' section with search filters and a table of results.



Search filters: Tipologia: Tutte, dal: 01/01/2024, al: 02/12/2024, Stato invio: Tutte

Data di somministrazione	Assistito	Vaccino somministrato	Segnalazioni
16/10/2024	PAZIENTE PROVA	FLUAD TETRA*1SIR+AGO 24-25	
02/12/2024	VACCINAZIONI SICILIA	VAXIGRIP TETRA*10SIR+AGO 24-25	Non è indicato il lotto del vaccino.
02/12/2024	MOUSE MICKY	FLUAD TETRA*10SIR+AGO 24-25	

Dopo aver cliccato su «**Ricerca vaccinazioni**» e visualizzato l'elenco delle stesse.

Nell'elenco oltre alle altre informazioni necessarie, è possibile visionare lo **stato di invio delle vaccinazioni**; solo e soltanto le registrazioni valorizzate dall'icona  sono da considerarsi correttamente inviate al sistema regionale

Invio cumulativo
vaccinazioni
ad On.VAC AVUR

Ricerca vaccinazioni Invia Vaccinazioni Esporta in PDF			
Parametri di ricerca			
Tipologia	Tutte	dal 01/01/2024	al 02/12/2024 Stato invio Tutte
Data di somministrazione	Assistito	Vaccino somministrato	Segnalazioni
 16/10/2024	PAZIENTE PROVA	FLUAD TETRA*1SIR +AGO 24-25	
02/12/2024	VACCINAZIONI SICILIA	VAXIGRIP TETRA*10SIR +AGO 24-25	Non è indicato il lotto del vaccino.
 02/12/2024	MOUSE MICKY	FLUAD TETRA*10SIR +AGO 24-25	

Eventuali **notifiche di non conformità** saranno riportate nella colonna «**Segnalazioni**» in modo da poter poi correggere la singola registrazione nel gestionale di cartella clinica per un successivo invio.

Il pulsante «**Invia Vaccinazioni**» permette l'invio cumulativo delle registrazioni non ancora inviate (*cioè, delle sole vaccinazioni inserite secondo lo standard previsto dalla nuova campagna 2024-2025, a partire dal momento in cui siano stati effettuati gli aggiornamenti propedeutici del programma e delle relative banche dati*).