



# CGM ANALYTIX



CompuGroup  
Medical

## UTÖKNINGSFUNKTIONALITET KVALITETSKONTROLL

CGM ANALYTIX Uppföljning Kontrollresultat erbjuder tre utökade funktioner som kan vara väl värda i en större laboratorieorganisation. Dessa är:

- Notifiering
- Inkörningsloter
- Mentor/Adept

### TILLÄGG – Utökningsfunktionalitet Notifieringar

Notifiering om kontroller inte körs enligt uppsatt schema.

### BESKRIVNING

I samband med sökning i Uppföljning kontrollresultat, presenteras notifieringar som symboler per kontroll om den inte körts enligt uppsatt schema

### NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Då stora laboratorieorganisationer har en stor kontrollverksamhet säkerställer notifieringar att kontroller körs på planerad tid under dygnet.

### TILLÄGG – Utökningsfunktionalitet Inkörningsloter

Inkörningsloter för inkörning av nya kontroll-loter parallellt med dem som är i drift.


### BESKRIVNING

I kvalitetskontrollkonfigureringen går det att skapa Inkörningsloter som aktiveras för mottagning av resultat från inkörningskontroller. Resultaten som mottas, kan därefter med automatik med beräkningshjälp omsättas till ny karakteristik för den nya loten.

Byte av kontroll-lot presenteras därefter tydligt i programmet Uppföljning kontrollresultat, se bild nedan.

### NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Inkörningsloter eliminerar användandet av andra verktyg, så som Excel för inkörandet av nya loter.

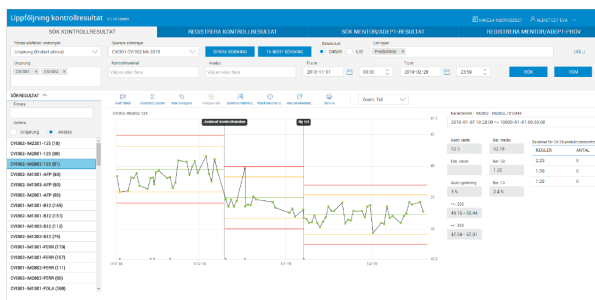

För mer information eller beställning kontakta oss:  
 CompuGroup Medical LAB AB  
 Cirkelgatan 14  
 781 72 Borlänge  
 Tel +46 (0) 243 21 76 00  
 E-mail info.cgmlab.se@cgm.com



# CGM ANALYTIX



CompuGroup  
Medical

## UTÖKNINGSFUNKTIONALITET KVALITETSKONTROLL

### TILLÄGG – Utökningsfunktionalitet Mentor/Adept

Mentor/Adept för en förenklad kontrollhantering när laboratorieorganisationen har många instrument av samma typ.

### BESKRIVNING

Mentor/Adept nyttjar befintliga patientprover till kvalitetskontroll av instrument för att jämföra laboratorieorganisationens olika analysinstrument med varandra.

### NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Mentor/Adept minskar användningen av externa kontroller, då de externa kontrollerna endast behöver köras på mentor-instrumentet. Med Mentor/Adept jämförs övriga instrument (adepter) mot mentor-instrumentet.

### SUPPORT OCH UNDERHÅLL

För tillgång till Utökningsfunktionalitet krävs en licensnyckel mot en engångserlagd licens.

För mer information eller beställning kontakta oss:  
CompuGroup Medical LAB AB  
Cirkelegatan 14  
781 72 Borlänge  
Tel +46 (0) 243 21 76 00  
E-mail [info.cgmlab.se@cgm.com](mailto:info.cgmlab.se@cgm.com)

AUGUSTI 2024