

IN NUR  
**5 MINUTEN**  
INSTALLIERT!

**CGM ALBIS**

Arztinformationssystem



## **KURZANLEITUNG**

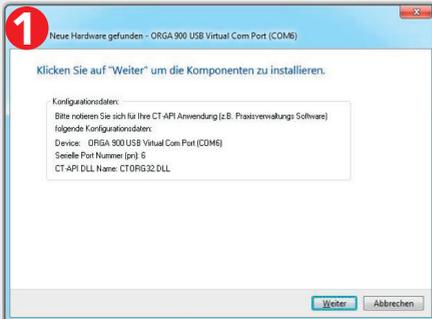
Anbindung eines  
mobilen Kartenterminals  
an CGM ALBIS



# VORBEREITUNG

Stecken Sie das mobile Kartenterminal an den Rechner per USB an:

Treiberinstallation durchführen.



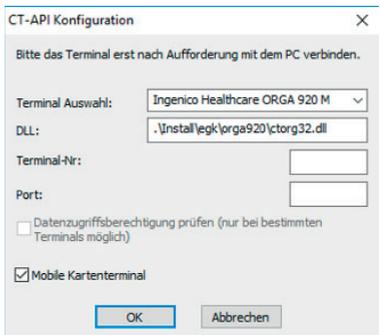
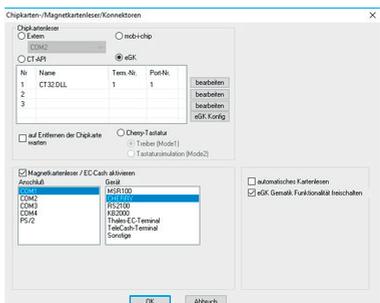
**3** Sollte der Treiber nicht automatisch installiert werden, führen Sie die Treiberinstallation manuell durch. Das Setup hierfür finden Sie unter: <https://ingenico.de/healthcare/downloads>

Im Gerätemanager des Rechners den COM-Port abfragen.



# INSTALLATION DES MOBILEN KARTENTERMINALS

1	In CGM ALBIS unter <i>OPTIONEN/GERÄTE</i> > <i>Chipkartenleser/Konnektoren ...</i> öffnen	
2	Im Dialog <i>Chipkarten-/Magnetkartenleser/Konnektoren</i> unter <i>Chipkartenleser CT-API</i> auswählen (nur zur Installation/Konfiguration).	
3	Die entsprechende Zeile zum Kartenterminal aus der Tabelle auswählen und rechts auf <i>bearbeiten</i> klicken	

<p><b>4</b></p>	<p>Folgende Felder auswählen:</p> <p><b>Terminalauswahl:</b> Ingenico Healthcare ORGA 920 M  <b>DLL:</b> .\Install\egk\orga920\ctorg32.dll  <b>Terminal-Nr.:</b> je nach Zeile (Nr.) wie unter Pkt. 3 eingetragen wurde  <b>Port:</b> je nach Software-Treiber und Systemsteuerung   Geräte-Manager [x] Mobile Kartenterminal</p> <p>Den Dialog mit Klick auf [OK] verlassen</p>	
<p><b>5</b></p>	<p>Daraufhin öffnet sich der Dialog <i>Chipkarten-/Magnetkartenleser/Konnektoren</i>, hier bitte unter Chipkartenleser eGK auswählen</p>	

# ABRUFEN DER PATIENTENDATEN VOM MOBILEN KARTENTERMINAL IN DER PRAXIS

<p><b>1</b></p>	<p>Mobiles Kartenterminal mit dem USB an den entsprechenden Arbeitsplatz anschließen.</p>	<p>... auf dem Kartenterminal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>USB connected</i></li> <li>2. <i>Bitte HBA oder SMC-B stecken</i></li> </ol>
<p><b>2</b></p>	<p>HBA oder SMC-B in das mobile Kartenterminal stecken und ca. 5 Sekunden warten (Kartensymbol wird bei eingesteckter Karte gelb).</p>	<p>... auf dem Kartenterminal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Eingabe Freigabe - PIN HBA</i> <i>PIN.HBA *****</i></li> </ol>
<p><b>3</b></p>	<p>Eingabe des PIN von dem/r gesteckten HBA/ SMC-B.</p>	<p>... auf dem Kartenterminal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>PIN erfolgreich verifiziert!</i></li> </ol>
<p><b>4</b></p>	<p>Klicken Sie zum Einlesen der Daten in CGM ALBIS auf das entsprechend farbig hervorgehobene Symbol.</p> 	<p>... in CGM ALBIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Suche Daten</i></li> <li>2. <i>Lösche Daten</i></li> </ol> <p>Dialog <b>Chipkarten-Daten</b> wird bei Vorhandenen Patienten geöffnet; bei neuen Patienten wird der Dialog zur Patientenummer geöffnet.</p>

## **CompuGroup Medical Deutschland AG**

Geschäftsbereich ALBIS

Maria Trost 23 | 56070 Koblenz

info.albis.de@cgm.com

T +49 (0) 261 8000-1600

F +49 (0) 261 8000-1650

[cgm.com/albis](http://cgm.com/albis)

